


CHLAZENÝ INKUBÁTOR IPP 800

NOVINKA

memmert

- okamžitý účinek díky Peltierově článku
- nyní objem 749 litrů
- nízké vibrace, vysoká preciznost zpracování
- extrémně vysoká úspora energie díky Peltierově článku, zejména při teplotách blízkých teplotě okolí
- PID regulátor a dva senzory Pt 100 zajišťují rovnoměrné a přesné rozložení teploty v komoře
- kalibrační certifikát výrobce ve standardní dodávce
- autodiagnostický systém se signalizací poruch
- digitální sedmi denní program
- možnost programování až 40 teplotních ramp z nichž každá se dá nastavit v rozmezí od 1 minuty do 999 hodin
- LCD displej se zobrazením
- možnost zápisu dat pomocí GLP protokolu
- rozhraní USB včetně software Celsius pro programování a dokumentaci
- čipové karty

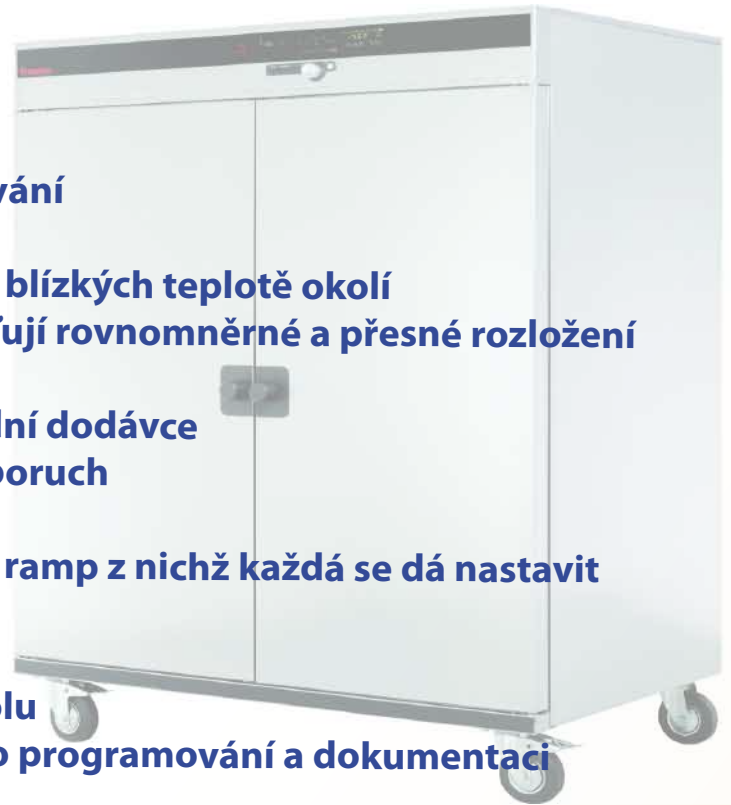

Klikni na obj.číslo a přejdi do e-shopu

395 354 621 800

228 820,- bez DPH